

Bài 11:

Thực hành: Đo gia tốc rơi tự do



Khởi động




**Các vật rơi tự do chuyển động rất nhanh, làm thế nào đo được gia tốc rơi tự do của vật?*



Dụng cụ thí nghiệm

- Máng đứng, có gắn dây dọi (1).
- Vật bằng thép hình trụ (2).


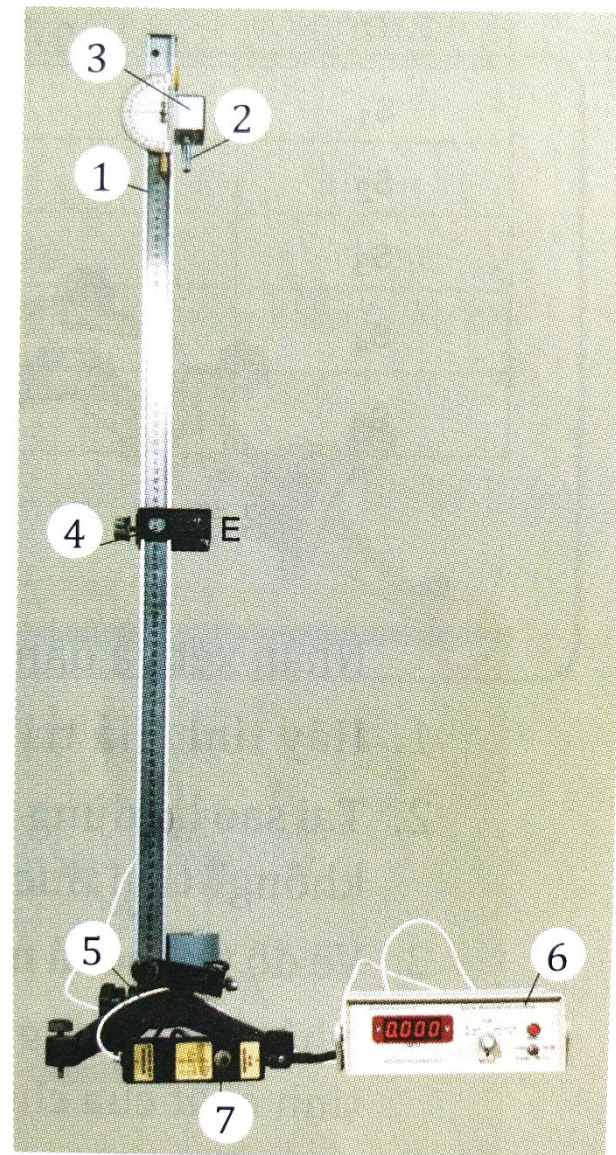


I Dụng cụ thí nghiệm

- Nam châm điện N, dùng giữ và thả trụ thép (3)
- Cổng quang điện E (4)




Vật chuyển động

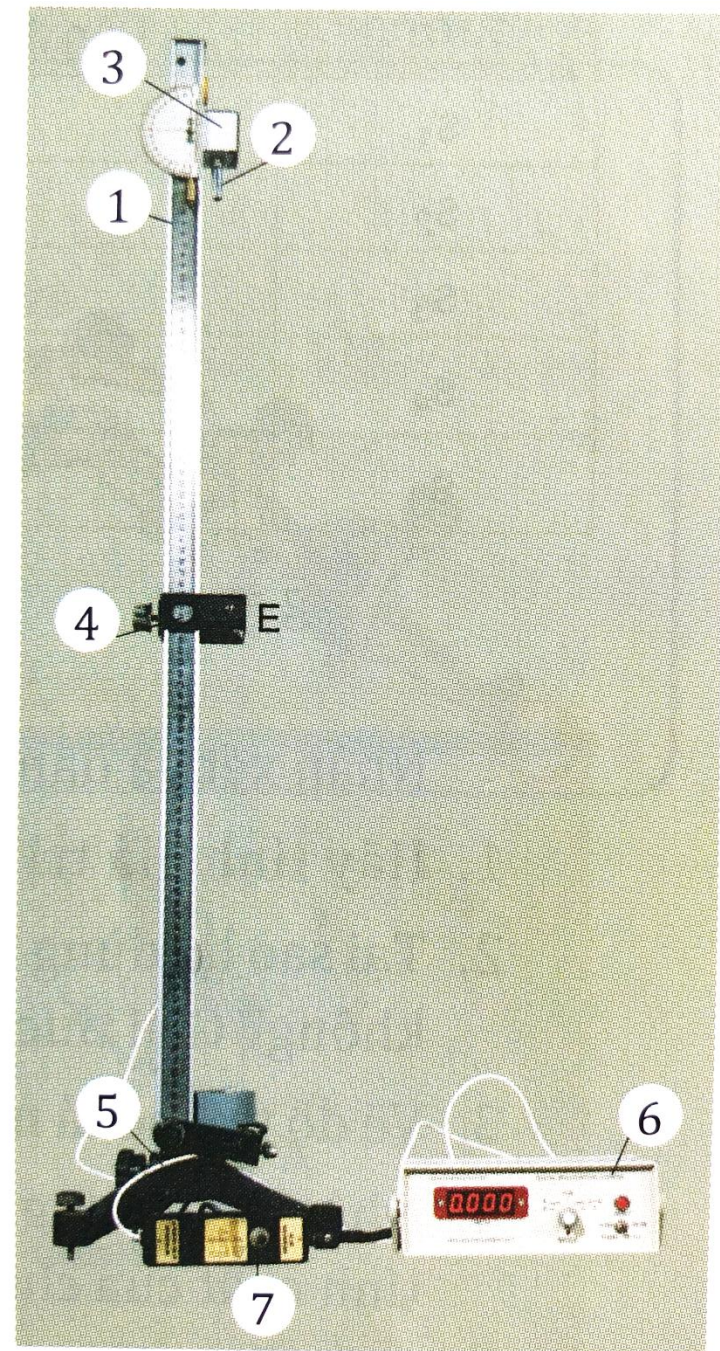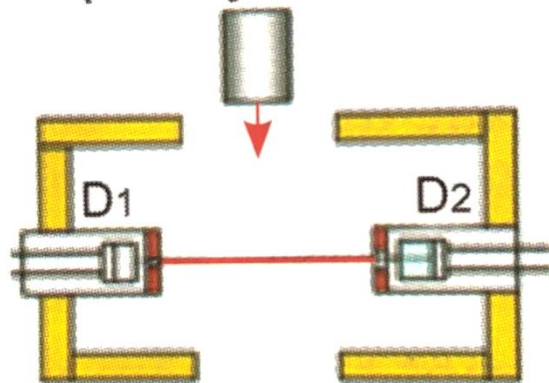

I Dụng cụ thí nghiệm

- Giá đỡ có đế ba chân, có vít chỉnh cân bằng và trụ thép (5).
- Đồng hồ đo thời gian hiện số (6).
- Công tắc kép (7).

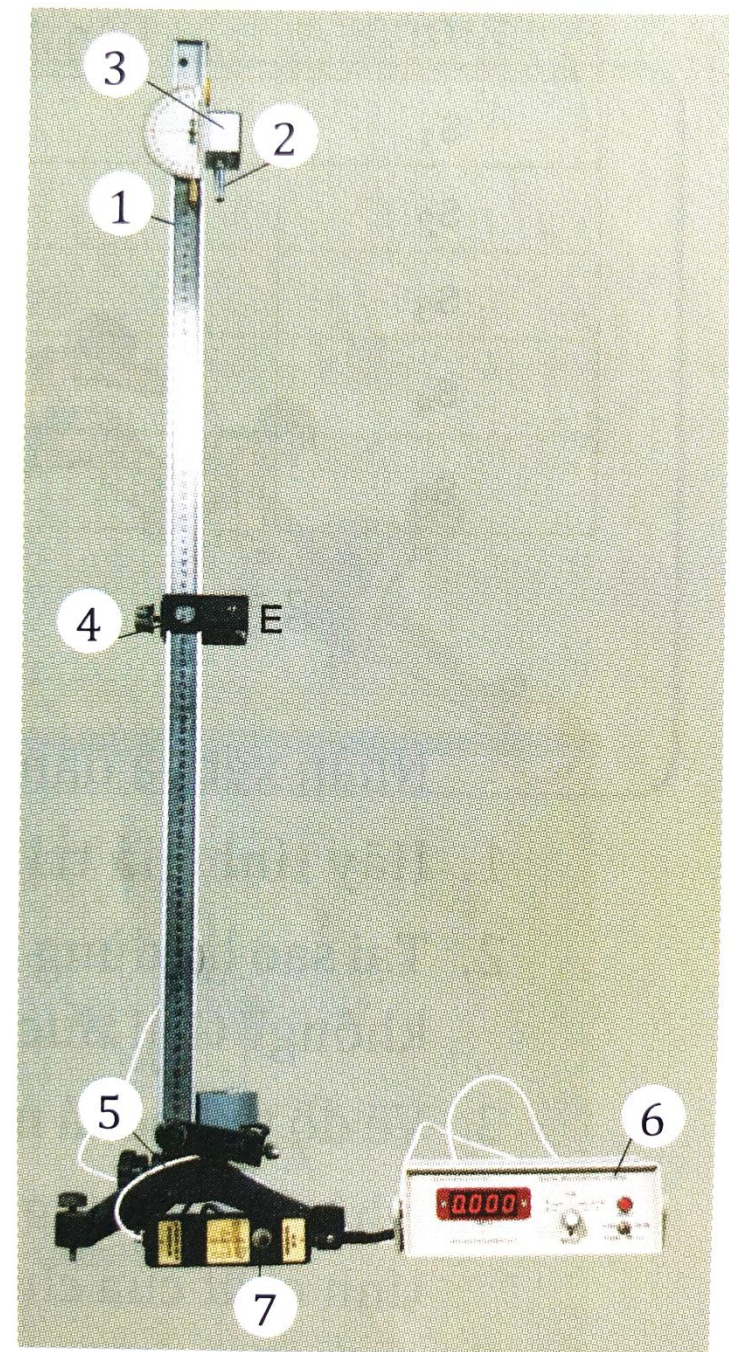



Thiết kế phương án thí nghiệm



Thảo luận về phương án thí nghiệm dựa trên hoạt động sau: Thả trụ thép rơi qua cổng quang điện trên mạng đang và trả lời câu hỏi.

- ❖ Xác định gia tốc rơi tự do của trụ thép theo công thức nào?
- ❖ Để xác định gia tốc rơi tự do của trụ thép cần đo các đại lượng nào?
- ❖ Làm thế nào để trụ thép rơi qua cổng quang điện?
- ❖ Cần đặt chế độ đo của đồng hồ ở vị trí nào để đo được đại lượng cần đo?



Lưu ý



Để thả rơi trụ thép theo phương thẳng đứng có thể thực hiện như sau

- Đặt máng đứng lên giá đỡ. Vặn chặt vít hãm.
- Nối công tắc điện với của đồng hồ đo thời gian hiện số.
- Cắm nguồn điện với NCD và nối công tắc vào ổ cắm A, nối cổng quang điện ổ cắm B vào mặt sau của đồng hồ đo thời gian.
- Cắm nguồn điện của đồng hồ và bật công tắc nguồn. Đặt trụ thép tại vị trí tiếp xúc với nam châm điện N và bị giữ lại ở đó.
- Nhấn nút của hộp công tắc kép để ngắt điện vào nam châm điện.



Tiến hành thí nghiệm

1. Cắm nam châm điện vào ổ A và cổng quang vào ổ B ở mặt sau của đồng hồ đo thời gian hiện số.
2. Đặt MODE đồng hồ đo thời gian hiện số ở chế độ thích hợp.
3. Đặt trụ thép tại vị trí tiếp xúc với nam châm điện N và bị giữ lại ở đó.
4. Nhấn nút RESET của đồng hồ MC964 để chuyển các số hiển thị về giá trị ban đầu 0.000.






Tiến hành thí nghiệm

5. Nhấn nút của hộp công tác kép để ngắt điện vào nam châm điện: Trụ thép rơi xuống và chuyển động đi qua cổng quang điện.

6. Ghi lại các giá trị thời gian hiển thị trên đồng hồ vào Bảng 11.1.

7. Dịch chuyển cổng quang điện ra xa dần nam châm điện, thực hiện lại các thao tác 3, 4, 5, 6 bốn lần nữa. Ghi các giá trị thời gian tương ứng với quãng đường s vào Bảng 11.1 trong báo cáo thực hành

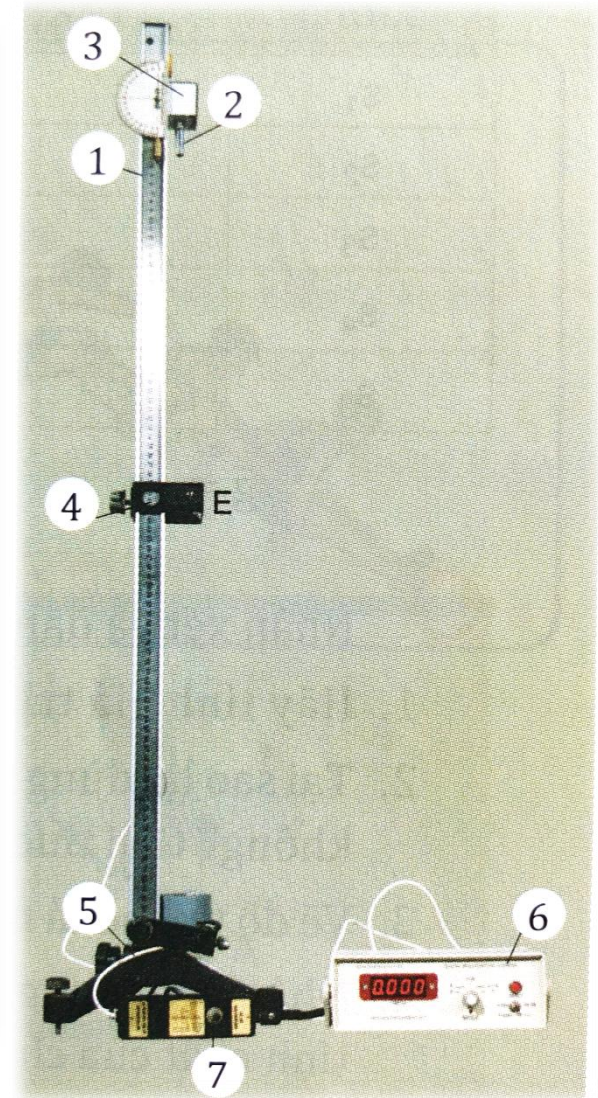

IV Kết quả thí nghiệm

Bảng 11.1

Quãng đường $s(\text{m})$	Lần đo thời gian t (s)				
	Lần 1	Lần 2	Lần 3	Lần 4	Lần 5
S_1					
S_2					
S_3					
S_4					
S_5					

$\bar{g} = \dots$ (m/s²)

$\Delta g = \dots$ (m/s²)

$g = \dots$ (m/s²)

Hoạt động



Nhận xét và đánh giá kết quả thí nghiệm

1. Hãy tính giá trị trung bình và sai số tuyệt đối của phép đo gia tốc rơi tự do.
2. Tại sao lại dùng tạ thép làm vật rơi trong thí nghiệm? Có thể dùng viên bi thép được không? Giải thích tại sao?
3. Vẽ đồ thị mô tả mối quan hệ s và t^2 trên hệ tọa độ ($s - t^2$)
4. Nhận xét chung về dạng của đồ thị mô tả mối quan hệ s và t^2 rồi rút ra kết luận về tính chất của chuyển động rơi tự do.
5. Hãy đề xuất một phương án thí nghiệm khác để đo gia tốc rơi tự do của trụ thép.